


**Osobní digitální váha Tanita – Monitor tělesného tuku**  
Model BC-730



Návod k obsluze a reklamční řád

Děkujeme vám za výběr monitoru složení těla Ironman Tanita. Tento monitor je jeden ze široké řady domácích zdravotnických výrobků vyrobených firmou Tanita. Tento návod k obsluze vás provede postupem nastavení a nastílní hlavní rysy. Prosim, mějte jej po ruce pro budoucí použití. Produkty Tanita zahrnují nejnovější klinické výzkumy a technologické inovace. Veškerá data jsou sledována naším Tanita Lékařským poradním sbor pro zajištění přesnosti. Tento přístroj nesmí používat lidé s lékařským implantátem, jako např. s podpůrnými srdečními přístroji. Tento přístroj využívá slabý elektrický proud, který může ovlivnit činnost druhého přístroje. Těhotné ženy by měly používat pouze funkci váhy. Všechny ostatní funkce nejsou určeny pro těhotné ženy. Nepokládejte monitor na kluzký povrch, jako je mokrá podlaha. Tento monitor tělesného tuku je určen pro dospělé a děti (ve věku 5-17) s aktivním až středně aktivním životním stylem a dospělě s atletickým tělesným typem. Tanita definuje "atleta" jako osobu podléající se na intenzivní fyzické aktivitě cca 10 hodin týdně a který má klidovou tepovou frekvenci přibližně 60 tepů za minutu nebo méně. Definice "atleta" zahrnuje "životnost fitness" jedinců, kteří byli fit 10 let, ale v současné době jej vykonávají méně než 10 hodin týdně. Funkce monitoru tělesného tuku není určena pro těhotné ženy, profesionální sportovce nebo kulturisty. Zaznamenaná data mohou být ztracena, pokud je přístroj používán nesprávně nebo je vystaven elektrickému přepětí. Tanita nese žádnou odpovědnost za jakýkoliv druh ztráty způsobené ztrátou zaznamenaných dat. Tanita nese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ztráty způsobené těmito způsoby nebo jakýchkoli nároků ze strany třetí osoby. Poznámka: Procento tělesného tuku se bude lišit v závislosti na množství vody v těle a může být ovlivněno dehydratací nebo nadměrným hydratací. Tento návod k použití obsahuje důležité informace a měl by být trvale k dispozici.

**Vlastnosti a funkce**

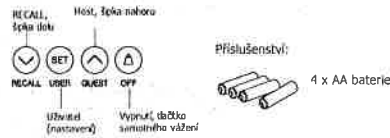

**Před prvním použitím**

**Vložení baterií.** Otevřete kryt baterií na zadní straně platformy. Vložte dodané AA baterie, jak je uvedeno. Dbejte na správnou polaritu. Jestliže jsou baterie špatně vloženy, kapalina může vytéct a poškodit produkt. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte všechny baterie. Vložené baterie z tovarů mohou mít zkrácenou kapacitu.

**Poloha monitoru**

Umístěte měřicí platformu na pevný, rovný povrch, kde je minimální vibrace k zajištění bezpečného a přesného měření. Nestoupejte na okraj platformy.

**Manipulační tipy**

- Tento monitor je přesný přístroj využívající nejmodernější technologii.
- Pro udržení zařízení v co nejlepší stavu, postupujte pečlivě podle následujících pokynů:
  - Nepokoušejte se rozobírat měřicí platformu.
  - Skladujte přístroj vodorovně a umístěte jej tak, že tlačítko nebude stisknuto omylem.
  - Vyhnete se nadměrným nárazům nebo vibracím přístroje.
  - Umístěte přístroj v oblasti volného přímého slunečního záření, topných zařízení, vysoké vlhkosti, nebo extrémní změnou teploty.
  - Nikdy nepoužívejte do vody. Použijte alkohol k čištění elektrod a čistící skla (použijte hadřík), aby byly lesklé, vyhněte se mýdlu.
  - Nevstupujte na platformu, pokud je vlná.
  - Nepokládejte žádné předměty na platformu.

**Získání přesných hodnot**

Pro zajištění přesnosti by mělo být měření bez oděvu a v souladu s podmínkami hydratace. Pokud se nechcete svlékat, vždy sundáte ponožky nebo punčochy a ujistěte se, že jsou chodidla nohou čistá, než vstoupíte na měřicí platformu. Ujistěte se, že vaše paty jsou správně zarovnané na elektrodách platformy. Nebojte se, pokud vaše nohy vypadají příliš velké, přesné měření můžete získat, pokud vaše prsty přečnívají přes platformu. Nejlepší je měření ve stejnou denní dobu. Zkuste počkat asi tři hodiny po vstávání, jídle nebo těžkém cvičení před začátkem měření. Hodnoty přijaté na základě jiných podmínek, nemusí mít stejnou absolutní hodnotu, které jsou přesné pro určitý procenta změny, pokud jsou hodnoty přijímány konzistentním způsobem. Chcete-li sledovat pokrok, porovnejte váhu a procento tělesného tuku měření po určité dobu za stejných podmínek.



Poznámka: Přesné měření nebude možné, pokud nejsou chodidla čista nebo pokud jsou vaše kolena ohnutá nebo jste veselé.

**Funkce automatického vypnutí**

- Funkce automatického vypnutí vypne napájení automaticky v následujících případech:
  - Pokud přerušíte proces měření. Napájení se automaticky vypne během 30ti vteřin v závislosti na typu provozu.
  - V průběhu programování, pokud se nedotknete některého z tlačítek nebo tlačítek do 60ti vteřin.
  - Poté, co jste dokončili proces měření.

**Režim měření hmotnosti – nastavení jednotek měření**

Poznámka: Při použití v modelu, které obsahuje přepínač jednotek hmotnosti. Můžete změnit jednotky hmotnosti pomocí přepínače na zadní straně váhy. Poznámka: Pokud je režim nastaven na libry, režim programování výšky se automaticky nastaví na stopy a palce. Podobně, je-li vybrána kg, výška se automaticky nastaví na centimetry.

**Nastavení (vynulování) data a času**

- Nastavení data**  
Vložte baterie do váhy a poté stiskněte libovolné tlačítko k nastavení Rok (Year) / Měsíc (Month) / Day (den). Stisknutím tlačítka <Nahoru/Dolů> nastavte rok a pak stiskněte tlačítko SET. Přístroj pípne k potvrzení.  
2. nastavení Hour (hodin)  
Stisknutím tlačítka <Nahoru/Dolů> nastavte hodiny a potom stiskněte tlačítko SET. Přístroj pípne po potvrzení.  
3. Set Minute (minut)  
Stisknutím tlačítka <Nahoru/Dolů> nastavte minuty a potom stiskněte tlačítko SET. Jednotka dvakrát pípne po potvrzení naprogramování.  
Váha se pak automaticky vypne.  
Poznámka:
  - Po výměně baterií, nebo chcete-li datum a čas vynulovat, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou (recall) a začne proces programování datum a času. Výměna baterií způsobí ztrátu nastavení data a času.
  - 60 vteřin nebo více nečinnosti způsobí automatické vypnutí během tohoto procesu. Žádné údaje nebudou uloženy.
  - Pokud uděláte chybu nebo chcete přístroj vypnout před dokončením programování, stiskněte tlačítko OFF pro vypnutí váhy. Žádné údaje nebudou uloženy jako výsledek.

**Nastavení a uložení osobních dat do paměti**

- Měření lze provozovat pouze, pokud jsou nastavena a uložena osobní data v paměti.
- Stiskněte tlačítko Set k zapnutí přístroje. Přístroj pípne po potvrzení aktivace, zobrazí se číslo osobního údaje a displej začne blikat. Poznámka: Pokud nechcete ovládat přístroj po dobu 60 vteřin poté, co byl přístroj zapnut, automaticky se vypne. Poznámka: Pokud uděláte chybu nebo chcete přístroj vypnout dříve, než jste dokončili programování, stiskněte tlačítko OFF k vypnutí.
  - Zvolte číslo osobního údaje  
Stisknutím tlačítka <Nahoru/Dolů> vyberte Osobní číslo (1, 2, 3, 4, nebo 5) a pro potvrzení stiskněte tlačítko SET.  
3. Nastavte datum narození  
Nastavte datum vašeho narození (rok / měsíc / den) za použití tlačítka <Nahoru/Dolů>. Stiskněte tlačítko SET pro potvrzení každého zobrazení. Přístroj pípne po potvrzení. Poznámka: Rozsah váhy je 5-99.  
4. Vyberte Žena nebo Muž  
Pomocí tlačítek nahoru / dolů procházejte Žena (♀) nebo Muž (♂), Žena / Atlet (A) a Muž / Atlet (M) nastavení, stiskněte tlačítko SET. Přístroj pípne po potvrzení.

Distribútor pro ČR: Martina Grosšová - Vitalshop, Žitná 131, 470 01 Česká Lípa  
IČO: 226 37 765, DIČ: CZ2263062312, e-mail: vitalshop@vitalshop.cz, www.vitalshop.cz, tel.: +420 603 172 191  
Živnostenský list č.j. ŽIVCL/16/77/2011/SEB, sp. značka: ŽIVCL/16/77/2011/SEB

Distribútor pro ČR: Martina Grosšová - Vitalshop, Žitná 131, 470 01 Česká Lípa  
IČO: 226 37 765, DIČ: CZ2263062312, e-mail: vitalshop@vitalshop.cz, www.vitalshop.cz, tel.: +420 603 172 191  
Živnostenský list č.j. ŽIVCL/16/77/2011/SEB, sp. značka: ŽIVCL/16/77/2011/SEB

**5. Zadejte výšku**  
Na displeji se zobrazí výchozí (170 cm) (rozsaň výšky je 90cm - 220cm). Pomocí tlačítek <Nahoru/Dolů> určete výšku a poté stiskněte tlačítko SET. Přístroj pípne jednou pro potvrzení potvrzení. Na displeji se zobrazí osobní údaje pro potvrzení a pak se na displeji objeví "0.0" a váha je připravena k měření.

**6. Mějte svou váhu a množství tělesného tuku**  
Vstupte na váhu po zobrazení "0.0" na displeji do 30ti vteřin. Nesestupujte, dokud není zobrazeno % tělesného tuku. Naměřené hodnoty se zobrazují po dobu 40 vteřin. Váha se poté vypne a měření se uloží do paměti.

Poznámka: Pokud jste vstoupili na váhu před "0.0", objeví se na displeji "Error" a nezískáte hodnoty. Kromě toho, pokud nevstoupíte na váhu do cca 30ti vteřin poté, co se objeví "0.0", váha se vypne automaticky. Prosim zkuste znovu nastavit a uložit osobní údaje.

Poznámka: Pokud změníte datum narození a / nebo pohlaví, přístroj zobrazí "CLR". Pokud zvolíte "ANO" pomocí tlačítek <Nahoru/Dolů>, budou stávající osobní údaje odstraněny. Zvolíte-li "NE", pomocí tlačítek <Nahoru/Dolů>, žádné nové údaje nebudou uloženy (stávající data budou beze změny), pak se přístroj vypne.

**Získání hmotnosti a hodnot tělesného tuku – po nastavení**

- Po naprogramování vašich osobních dat můžete začít měřit.
- Vstupte na váhu
  - Vstupte na váhu, když je vypnutá, váha se zapne automaticky a začne měřit.**
  - Získejte hodnoty  
Poté, co jsou měření přijata, hodnoty se automaticky zobrazí v níže uvedeném pořadí.  
Poté, co se zobrazí poslední výsledek, opět se zobrazí hmotnost a % tělesného tuku a pak se přístroj automaticky vypne.  
Uživatel může pomocí tlačítka <šipka nahoru> procházet různé výsledky.  
Pro rychlejší procházení hodnot, může uživatel stisknout a podržet tlačítko <šipka nahoru> po přečtení požadované hodnoty, uvolníte tlačítko pro zobrazení výsledku, měření se objeví na 40 vteřin před tím, než se přístroj automaticky vypne.  
Pokud se na displeji zobrazí **nesprávné osobní číslo**, Můžete změnit osobní číslo pomocí tlačítka SET. Tiskněte tlačítko SET, než se objeví vaše osobní číslo. Poté, co vyberete správné osobní číslo, vyčkejte po dobu 4 vteřin, na displeji se automaticky zobrazí vaše správné hodnoty.  
Naměřené hodnoty budou uloženy ve vašem osobním profilu paměti.  
Pokud zvolíte "Del", nebudou hodnoty uloženy do paměti.  
Poznámka: Pro děti (5-17 let) přístroj zobrazí pouze hmotnost a % tělesného tuku (nebudou zobrazovat Indikátor zdravého rozsahu).



**Funkce recall – zobrazení předchozích naměřených hodnot**  
Chcete-li získat předchozí hodnoty, stiskněte tlačítko Recall, když jsou zobrazeny hodnoty. Následující výsledek předchozích hodnot se zobrazí pomocí tlačítek <UP>.  
• Hmotnost • fyzická kondice • Viscerální (útrobní) tuk  
• % tělesného tuku • BMR  
• celkové % tělesné vody • Metabolický věk  
• svalová hmota • kostní hmota  
Opětovným stisknutím tlačítka Recall se vrátíte do aktuálního zobrazení výsledku.  
Poznámka: Pro děti (5-17 let), přístroj zobrazí pouze hmotnost a % tělesného tuku (nebudou zobrazovat Indikátor zdravého rozsahu).  
Poznámka: Nesestupujte, dokud není zobrazeno % tělesného tuku.

**Režim "host" (GUEST)**  
Režim Host umožňuje naprogramovat váhu pro jednorázové použití, aniž by použil číslo osobních údajů. Stisknutím tlačítka Guest aktivuje váhu. Pak postupujte podle pokynů: nastavení váhy, zvolte pohlaví, a určete výšku. Vstupte na váhu, když se zobrazí "0.0" na displeji. Vaše hmotnost se zobrazí jako první, i nadále stáje na váze, dokud se nezobrazí % tělesného tuku. Hodnoty budou zobrazeny po dobu 40ti vteřin. Poznámka: Nesestupujte, dokud není zobrazeno % tělesného tuku. Poznámka: Pokud jste vstoupili na váhu před tím, než se objeví na displeji "0.0", zobrazí se "Error" a nebudete možné získat hodnoty.

**Pouze samostatné vážení**  
Stiskněte tlačítko OFF. Po 2 až 3 vteřinách se objeví na displeji "0.0" a přístroj pípne. Vstupte na váhu. Objeví se hodnota hmotnosti těla. Na displeji se rozsvítí na dobu asi 20 vteřin a potom se napájení automaticky vypne.

**Řešení problémů**  
Pokud se vyskytnou následující problémy ... pak ...  
• chybný formát hmotnosti se zobrazí následovně kg, lb nebo st- lb  
Viz "Změna režimu hmotnosti".  
• Na displeji se objeví "Lo" nebo se objeví všechny údaje a okamžitě zmizí.  
Baterie jsou slabé. Když se zobrazí tato zpráva, okamžitě vyměňte baterie, protože slabé baterie budou mít vliv na přesnost měření. Vyměňte všechny baterie současně za nové AA baterie.  
Poznámka: Vaše nastavení nebudou vymazána z paměti při vyjmutí baterií.  
• "Err" se zobrazí při měření.  
Prosim, stávejte na platformě bez minimálního pohybu. Přístroj nemůže přesně změřit vaši hmotnost, pokud detekuje pohyb.

Procento tělesného tuku je více než 75 %, hodnoty nelze získat z přístroje.  
• Procento tělesného tuku se nezobrazí nebo se zobrazí "-----" poté, co se změjí hmotnost.  
Vaše osobní údaje nebyly naprogramovány. Postupujte podle pokynů pro nastavení osobních dat. Ujistěte se, že jste si sejmuli ponožky nebo punčochy a plošky nohou jsou čisté a řádně v souladu s vodítky na měřicí platformě.  
• Objeví se "OL" při měření.  
Hodnoty není možné získat, pokud je překročena kapacita hmotnosti.

**Specifikace**  
Nevyšší kapacita: 150 kg  
Přesnost měření: 0,1 kg  
Přesnost měření podtlu tělesného tuku: 0,1 %  
Osobní data: 5 pamětí  
4 x AA baterie (součástí)  
Spotřeba: 60mA maximálně  
Měřicí frekvence: 50 kHz, 500 uA

Vámi zakoupený výrobek obsahuje baterie. Dbejte následujících pokynů. Baterie nesmí do domovního odpadu. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen odevézt baterie na sběrném místě vaší obce, městské části nebo v obchodě, aby mohly být zpracovány šetrně k životnímu prostředí. Uvedení symbolu na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odveďte na určených sběrných místech, kde budou přijata dle práva. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůže zachovat centrální zdroj a napomáhá k prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důležitými aspekty ekologické odpovědnosti. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uloženy pokuty. Tento přístroj je označen podle EC nařízení 2004 / 108 / EC.

**Reklamační řád**  
Záruční podmínky: Na tento výrobek se poskytuje záruka 36 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Reklamační uplatnění během záruční doby bude vyžádána opravou nebo výměnou. Záruka se vztahuje na správnou funkci výrobku, výroby a materiální vady. Záruka se nevztahuje na vady vyvolané neodborným zásahem, vadou způsobenou vnějšími vlivy, to je nárazem, nepřesným zacházením apod., vady vzniklé použitím nekvalitního napájecího článku.  
Reklamační:  
1. Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do tří dnů a to písemnou formou ( e-mail ) nebo telefonicky.  
2. Pokud by závada byla způsobena naší stranou, bude vám vráten v odpovídající kvalitě obratem došlým na naše náklady.  
3. V písemném oznámení kupující uvede zjištěné závady ( druh, čím se projevují ), kontakty a číslo faktury.  
**ZÁRUČNÍ LIST (BC-730)** Datum prodeje: Razítko: Datum reklamacie:

Distribútor pro ČR: Martina Grosšová - Vitalshop, Žitná 131, 470 01 Česká Lípa  
IČO: 226 37 765, DIČ: CZ2263062312, e-mail: vitalshop@vitalshop.cz, www.vitalshop.cz, tel.: +420 603 172 191  
Živnostenský list č.j. ŽIVCL/16/77/2011/SEB, sp. značka: ŽIVCL/16/77/2011/SEB

Distribútor pro ČR: Martina Grosšová - Vitalshop, Žitná 131, 470 01 Česká Lípa  
IČO: 226 37 765, DIČ: CZ2263062312, e-mail: vitalshop@vitalshop.cz, www.vitalshop.cz, tel.: +420 603 172 191  
Živnostenský list č.j. ŽIVCL/16/77/2011/SEB, sp. značka: ŽIVCL/16/77/2011/SEB